


La nouvelle norme/ du microneedling RF

Avec une pénétration topique améliorée et révolutionnaire

POTENZA™
by CYNOSURE®



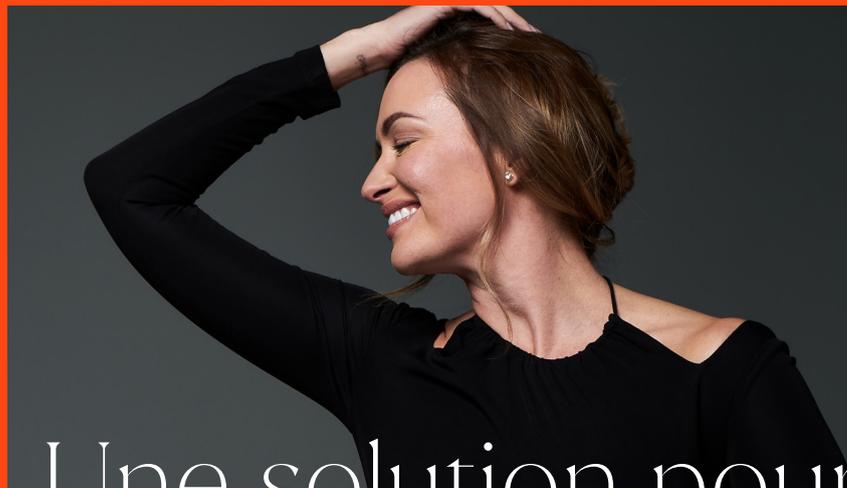

Une solution pour *chaque patient/*

La polyvalence du système Potenza vous permet de personnaliser les traitements en fonction des besoins spécifiques de vos patients : *pour tous les types de peau, partout sur le corps et à n'importe quel moment de l'année.*



Le premier dispositif mondial
RF à 4 modes qui permet
d'atteindre de *nouveaux*
sommets en microneedling

RAFFERMISSEMENT
CUTANÉ*

AMÉLIORATION DES
IMPERFECTIONS

REVITALISATION
DE LA PEAU



Traitez une plus grande *variété* d'affections / *À la fois superficielles et profondes*

Premier système RF à 4 modes au monde

Fonctions monopolaire, bipolaire, 1 et 2 MHz. Offrez des traitements superficiels et profonds avec le même système.

Technologie Tiger Tip™ unique

Traitez plusieurs profondeurs en une seule séance.

Fusion Tip


Permet une meilleure pénétration topique.

Applicateur à une seule aiguille

Ciblez et améliorez les imperfections.



Le premier et seul embout à offrir
une pénétration topique accrue
pour *optimiser les résultats* ✓

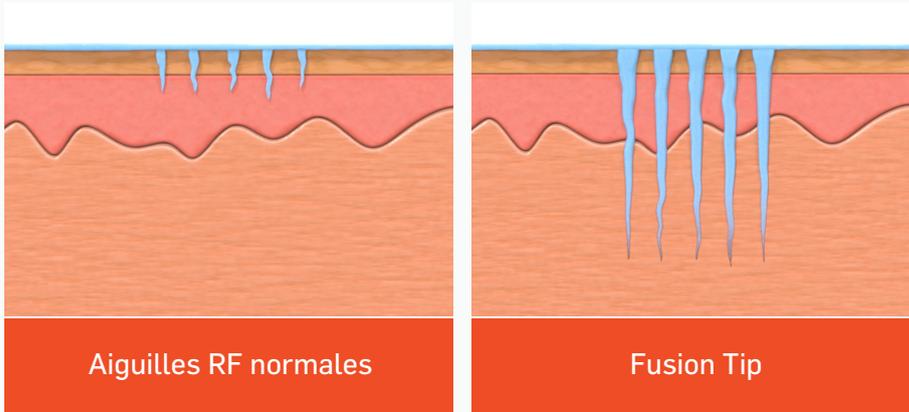

*Administrez en toute confiance vos produits
injectables dans le derme*






Fusion Tip

Matrice de 21 aiguilles isolées

Profondeur réglable de 0,5 à 2,5 mm

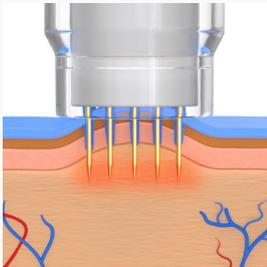

Utilise une double chambre à air pour capturer et libérer l'air vers la peau afin d'améliorer la pénétration des produits topiques dans les canaux.




Tiger Tip

Aiguilles semi-isolées

Matrice de 16, 25 et 49 aiguilles

Profondeur réglable de 0,5 à 4 mm

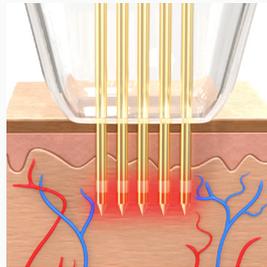


Permet de traiter plus de tissu en une seule séance sans sacrifier l'épiderme.



Aiguilles isolées

Matrice de 16, 25 et 49 aiguilles

Profondeur réglable de 0,5 à 4 mm

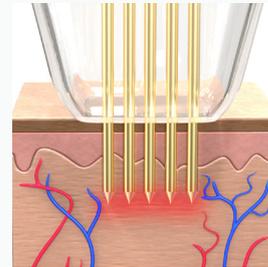


Permet de délivrer des traitements ciblés et profonds de la peau.



Aiguilles uniques isolées

Profondeur de 0,8 mm, 1,2 mm et 1,5 mm

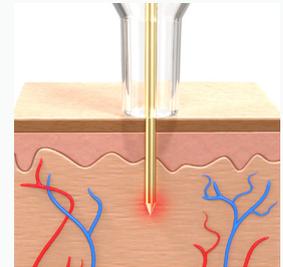

Permet de cibler et améliorer précisément les imperfections de la peau.

Offrez des *résultats*. Augmentez votre *rentabilité* /

VISAGE Photos publiées avec l'aimable autorisation de Murphy Plastic Surgery & Medical Spa




Avant et après la séance

COU Photos publiées avec l'aimable autorisation de S. Doherty, MD



Avant et après la séance

VENTRE Photos publiées avec l'aimable autorisation d'Elizabeth Huang, RN

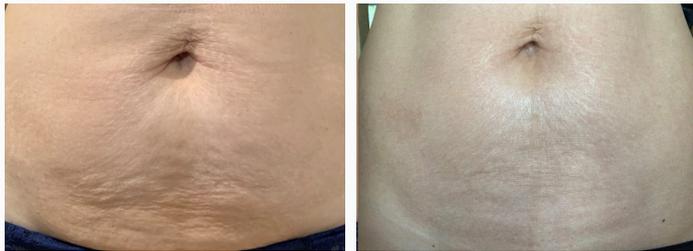

Avant et après la séance

VISAGE Photos publiées avec l'aimable autorisation de J.H. Yoon, MD



Avant et après 3 séances

Pour de
plus amples
informations,
rendez-vous sur

www.cynosure.com/potenza



*Par coagulation des tissus mous.

©2021. Cynosure, LLC. Tous droits réservés. Cynosure est une marque déposée de Cynosure, LLC. Tiger Tip est une marque déposée de Cynosure, LLC. Potenza est une marque déposée de Jeisys Medical, Inc. Cynosure, LLC détient l'exclusivité des droits sur les photos publiées. L'utilisation de ces photos est interdite sans l'autorisation écrite de Cynosure. Mannequin utilisé à des fins d'illustration uniquement, cette personne n'est pas un utilisateur du produit.

Le dispositif de microneedling par radiofréquence Potenza est destiné à l'électrocoagulation et à l'hémostase des tissus mous pour les affections dermatologiques. Les effets indésirables potentiels incluent des rougeurs ou picotements temporaires et une sensation de brûlure pendant la séance. Comme pour toutes les interventions médicales, ce traitement ne convient pas à tous les patients. Seul un médecin qualifié peut évaluer la possibilité de pratiquer un traitement sur un patient. Il est chargé de l'informer sur les risques encourus et les soins pré- et post-opératoires, et de lui fournir toutes les autres informations nécessaires. Les résultats peuvent varier d'une personne à l'autre et ne sont donc pas garantis. PRD_4362

Caractéristiques et accessoires

Type RF	Bipolaire, monopolaire
Puissance	50 watts max.
Fréquence	1 MHz, 2 MHz
Taux de répétition	0,5-3,0 secondes (incrément de 0,1 s)
Pièces à main	100-7043-001 : Pièce à main motorisée 100-7043-002 : Pièce à main AC
Embouts	Pièce à main motorisée
Aiguilles Fusion Tip	100-7043-063 : CP-21
Tiger Tip : aiguilles semi-isolées	100-7043-051 : S-16 100-7043-052 : S-25 100-7043-053 : S-49
Aiguilles isolées	100-7043-054 : I-16 100-7043-055 : I-25 100-7043-056 : I-49
Aiguilles uniques	Pièce à main AC 100-7043-060 : P1-08 100-7043-061 : A1-12 100-7043-062 : A1-15
Taille de l'aiguille	0,25mm
Durée de traitement	5-500 ms (incrément de 5 ms)
Alimentation électrique	100-240 V, 50/60 Hz, 500 VA
Dimensions	19,82 x 14,40 x 14,22 pouces (Support de câble inclus : 21,66 x 27,60 x 14,41 pouces)
Poids	Environ 9,52 kg
Chariot	45,72 x 45,80 x 96,52 cm, 32,02 kg